

# Quantum Blue® Adalimumab

## Medikamentenspiegel Schnelltest

Medikamenten-  
spiegel  
ohne Verzug



- Erster Schnelltest für das Adalimumab Monitoring
- Ergebnis innerhalb von 15 Minuten
- Messbereich von 1,3 bis 35 µg/mL Adalimumab
- Exzellente Übereinstimmung mit den Referenz-ELISAs


# Quantum Blue® Adalimumab Schnelltest

## Merkmale:

- Einziger quantitativer Schnelltest für Adalimumab
- Messbereich von 1,3 bis 35 µg/mL
- Deckt den Entscheidungsbereich von 5 bis 12 µg/mL ab\*
- Hohe Korrelation und Übereinstimmung mit den Referenz-ELISAs

\* Mitrev et al. 2017

## Korrelation zum ELISA:

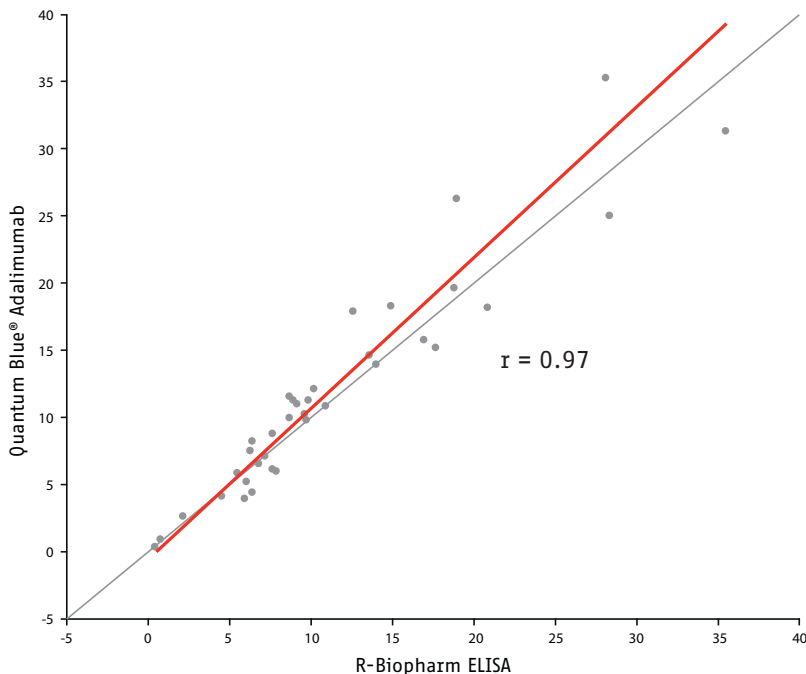

— Passing-Bablok fit

		RIDASCREEN ADM MONITORING (ELISA, µg/mL)		
		low	optimal	high
Quantum Blue Adalimumab (µg/mL)	low	20.0%	5.0%	0.0%
	optimal	0.0%	27.5%	0.0%
	high	0.0%	12.5%	35.0%

Vollständige Übereinstimmung: 82,5 %



BÜHLMANN Laboratories AG  
Germany/Switzerland  
info@buhlmannlabs.ch  
www.buhlmannlabs.ch  
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN in Austria GmbH  
Austria  
info@buhlmannlabs.at  
www.buhlmannlabs.at  
Phone +43 662 64 01 05

Quantum Blue® ist ein eingetragenes Warenzeichen von BÜHLMANN in vielen Ländern.

### Bestellcodes:

LF-TLAD10 10 Testkassetten  
LF-TLAD25 25 Testkassetten

### Weitere Produkte:

LF-TLIF10 10 Testkassetten  
LF-TLIF25 25 Testkassetten  
LF-CAL25 25 Testkassetten  
LF-CALE25 25 Testkassetten  
LF-CHR25 25 Testkassetten

CE-markierte Produkte