

Quantum Blue® Adalimumab

Dosage rapide des taux
résiduels (TRA)

Adapter
la thérapie
sans délai

- Premier test rapide pour la surveillance des TRA
- Résultat en 15 minutes
- Gamme de dosage de 1,3 à 35 µg/mL
- Excellente corrélation avec les tests ELISA de référence




Test rapide Quantum Blue® Adalimumab

Caractéristiques principales

- Premier test rapide et quantitatif pour le dosage de l'adalimumabémie
- Gamme de dosage de 1,3 à 35 µg/mL
- Couverture de l'intervalle décisif pour les taux résiduels de 5 à 12 µg/mL*
- Excellente corrélation avec les tests ELISA de référence

* Mitrev et al. 2017

Corrélation avec un test ELISA :

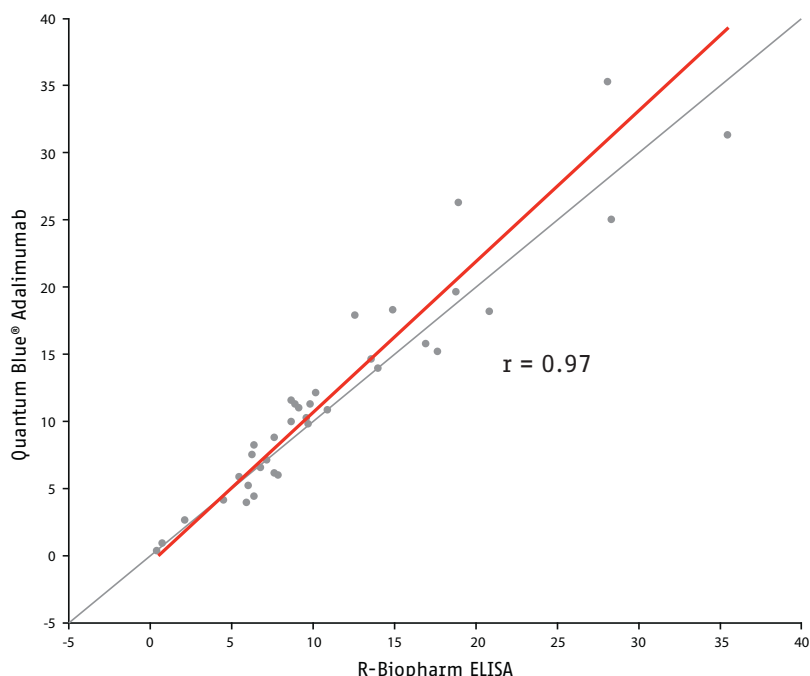

— Régression de Passing et Bablok

		RIDASCREEN ADM MONITORING (ELISA, µg/mL)		
		low	optimal	high
Quantum Blue® Adalimumab (µg/mL)	low	20.0%	5.0%	0.0%
	optimal	0.0%	27.5%	0.0%
	high	0.0%	12.5%	35.0%

concordance totale 82,5%



BÜHLMANN Laboratories AG
Switzerland
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN France SAS
France
info@buhlmannlabs.fr
www.buhlmannlabs.fr
Phone +33 3 89 66 91 14

Quantum Blue® est une marque déposée
de BÜHLMANN dans de nombreux pays.

Code de produit :
LF-TLAD10 10 cassettes
LF-TLAD25 25 cassettes

Autres produits :
LF-TLIF10 10 cassettes
LF-TLIF25 25 cassettes
LF-CAL25 25 cassettes
LF-CALE25 25 cassettes
LF-CHR25 25 cassettes

CE-marked products