

# Quantum Blue® Anti-Infliximab

## Medikamenten-Antikörper Schnelltest

Anti-IFX-Antikörper  
Ergebnis innerhalb  
von Minuten



- Lateral-Flow Schnelltest zur Bestimmung von Anti-Infliximab-Antikörpern
- Ergebnis innerhalb von 15 Minuten
- Exzellente Spezifität von 94,9% für den Anti-IFX Antikörper Nachweis
- Hohe Korrelation zum Referenz-ELISA



# Quantum Blue® Anti-Infliximab Medikamenten-Antikörper Schnelltest

## Merkmale:

- Schnellster Assay für qualitative Anti-Infliximab-Antikörper Messungen im Markt
- Exzellente Spezifität und Sensitivität für den Anti-IFX Antikörpernachweis
- Kombination aus Medikamentenspiegel und Medikamentenspiegel-Antikörpern ist eine ideale Komplettlösung auf der populären Quantum Blue® Plattform
- Medikamenten-Sensitivität ermöglicht die Bestimmung von freien Antikörpern
- Hohe Übereinstimmung von 88 % zum etablierten Referenz-ELISA

Messung von 238 Patientenproben mit dem Quantum Blue® Anti-Infliximab Schnelltest und einem Referenz-ELISA zeigt eine exzellente **Übereinstimmung von 88 %** (Fig.1).

		RIDASCREEN Kategorie 119 ng/mL		
		Negativ	Positiv	Gesamt
Quantum Blue® Anti-Infliximab 1.31 µg <sub>eq</sub> /mL	Negativ	112	23	135
	Positiv	6	97	103
	Gesamt	118	120	238

Fig.1

Übereinstimmung = 88%

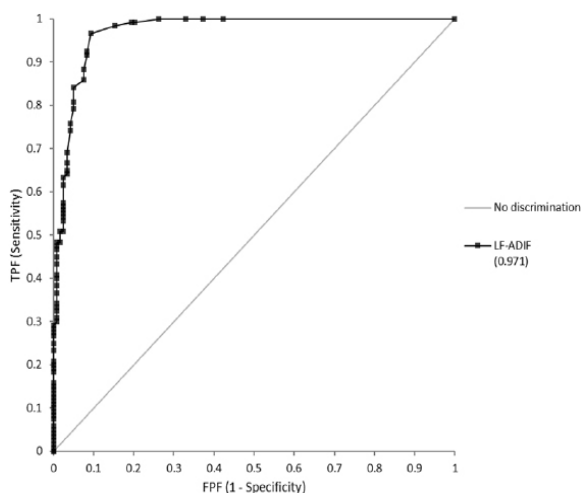


Fig.2

ROC-Kurvenanalyse zeigt eine **exzellente Spezifität von 94,9%** und eine **Sensitivität von 80,8%** bei einem Cut-off von 1,3 µg<sub>eq</sub>/mL mit einer AUC von 0,971 (Fig.2).



BÜHLMANN Laboratories AG  
Germany/Switzerland  
info@buhlmannlabs.ch  
www.buhlmannlabs.ch  
Phone +41 61 487 12 12

BÜHLMANN in Austria GmbH  
Austria  
info@buhlmannlabs.at  
www.buhlmannlabs.at  
Phone +43 662 64 01 05

Quantum Blue® ist ein eingetragenes Warenzeichen von BÜHLMANN in vielen Ländern.

**Bestellcodes:**  
LF-ADIF10 10 Testkassetten  
LF-ADIF25 25 Testkassetten

**Weitere Quantum Blue® Produkte:**  
LF-ADAD10 / 25 10 / 25 Testkassetten  
LF-TLIF10 / 25 10 / 25 Testkassetten  
LF-TLAD10 / 25 10 / 25 Testkassetten  
LF-CALE25 25 Testkassetten  
LF-CHR25 25 Testkassetten

CE-markierte Produkte